



# Einweg Schutz- Kleidung



# Warum wählen immer mehr Krankenhäuser und Einkaufsgemeinschaften Medline für ihren Komplettschutz?

Medline ist die führende Firma für Schutzbekleidung mit der umfassendsten Produktlinie zu einem ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis. Wenn hohe Kosten Ihre Einrichtung plagen, kann Medline Ihnen Lösungen anbieten, wie Sie diese Kosten in den Griff bekommen, ohne die Sicherheit Ihres Pflegepersonals zu gefährden.

Medline fertigt seit über 35 Jahren Schutzbekleidung an.

Unsere Auswahl an Schutzbekleidung beinhaltet großzügig geschnittene Fußbekleidung, Masken, Hauben, Untersuchungskittel und

Bereichsbekleidung, die allen Anforderungen und Bedürfnissen entsprechen, eine große Auswahl an Schutzanzügen sowie bequeme, farbige Kittel und Jacken.

**Unsere Produkte bieten den bestmöglichen Schutz mit dem größten Komfort zum günstigsten Preis**

Wir wissen, dass Sie auf Einweg-Schutzbekleidung vertrauen, um Ihr Personal sowohl sicher geschützt als auch bequem auszustatten. Aus diesem Grund verwenden wir nur die besten Materialien, die zum Schutz verfügbar sind

und dennoch den größtmöglichen Komfort bieten. In unseren Produkten und in deren Herstellung wenden wir die höchsten Qualitätsstandards an. Medline ist ISO 13458 zertifiziert.

## Informationen über die Materialien:

*Hier eine kurze Beschreibung der fünf Hauptmaterialien, die wir zur Herstellung der Medline Schutzbekleidung verwenden. Bitte sehen Sie auf dieser Seite nach, während Sie diese Broschüre durchschauen.*

### Polypropylen-Vlies

Das Standard-Material für Basis-Schutzbekleidung; hergestellt, indem Fasern zu einer einzigen Lage von atmungsaktivem, wie gewebt wirkenden Material verbunden werden. Seine Hauptvorteile sind Wirtschaftlichkeit und Komfort, es bietet jedoch auch einen leichten Schutz gegen Flüssigkeiten.

### SMS

Ein dreilagiges Material, das aus einer Lage Polypropylen besteht, die mit zwei Lagen Polypropylen-Vlies verbunden werden. Robust, gegen Flüssigkeiten schützend und atmungsaktiv bietet SMS eine optimale Mischung aus Schutz und Komfort. Geeignet für längere Tragezeiten mit geringem bis mäßigem Kontakt mit Flüssigkeiten.

### SMMS

Ein vierlagiges Material, das aus zwei Lagen Polypropylen besteht, die mit zwei Lagen Polypropylen-Vlies verbunden sind. Robust, mit sehr hohem Schutz vor Flüssigkeiten und atmungsaktiv bietet SMMS eine optimale Mischung aus Schutz und Komfort. Geeignet für mäßigen Kontakt mit Flüssigkeiten über ausgedehnte Tragezeiten.

### DuPont™ Isolation Wear™ Medizinische Materialien

medizinisches Material wird dank patentierter Technologie so hergestellt, dass eine spritzgeschützte Barriere entsteht, die atmungsaktiv ist und sich sehr weich anfühlt. Das Material entspricht den Anforderungen für Level 2-Schutz.

DuPont™ Suprel® IsolationWear™ wird mit Hilfe der patentierten Technologie hergestellt und bietet ein hohes Niveau an Schutz vor Flüssigkeiten, ohne den Komfort zu beeinträchtigen und gibt Ihnen dadurch Freiheit für Ihre Leistungen. Das Material entspricht den Anforderungen für Level 3-Schutz.

### Beschichtetes Polypropylen

Weiches Polypropylen-Vlies wird mit einer Schicht undurchlässigen Polyethylens beschichtet. Dieses leichte Material ist ideal für jede Situation, die ein hohes Maß an Schutz vor Flüssigkeiten erfordert.

### Atmungsaktives Laminat

Eine PE-Beschichtung auf ungewebtem Material bietet absoluten Schutz gegen Flüssigkeiten und ist sehr atmungsaktiv. Dieses Material ist ideal für lange Tragezeiten, in denen Kontakt mit Flüssigkeiten zu erwarten ist.

### Inhaltsverzeichnis

<b>AAMI Information</b>	3
<b>durch AAMI zugelassene Schutzkittel</b>	4-5
<b>Untersuchungskittel</b>	6-7
<b>Fußbekleidung</b>	8
<b>Hauben</b>	9
<b>Masken</b>	10-12
<b>Overalls</b>	13
<b>Kittel</b>	14
<b>Jacken/Schürzen/Duschhauben</b>	15


## Level der Schutz-Barrieren (aus AAMI PB70:2003)

ALLE Medline Schutzkleidungsartikel in dieser Broschüre entsprechen den strengen amerikanischen Richtlinien, festgelegt in AAMI PB 70.

Die folgende Tabelle ist in den AAMI PB 70-Richtlinien festgelegt. Die Farb-Kodierung entwickelte Medline, um die einzelnen Level deutlich zu trennen und diese Richtlinien sind für zukünftige europ. Leitlinien maßgebend. Diese Farbkodierung finden Sie auch an den Halsverschlüssen wieder.

ANSI/AAMI PB70 Barrier Performance	Test Methode	Test Definition	Anforderung
<b>Level 1</b>	Wasserwiderstand: Durchlässigkeit bei Aufprall AATCC 42	AATCC 42 misst den Widerstand des Materials auf die Durchlässigkeit von Flüssigkeiten bei deren Aufprall auf das Material (misst, ab welchem Druck das Material aufprallende Flüssigkeiten durchlässt)	Aufprall des Wassers: $\leq 4,5 \text{ g}$
<b>Level 2</b>	Wasserwiderstand: Durchlässigkeit bei Aufprall AATCC 42  Wasserwiderstand: Hydrostatischer Druck AATCC 127	AATCC 42 misst den Widerstand des Materials auf Wasserdurchlässigkeit unter konstantem und steigendem hydrostatischen Druck  AATCC 127 misst, ab welchem Druck das Material aufprallende Flüssigkeiten durchlässt	Aufprall von Spray $\leq 1,0 \text{ g}$  hydrostatischer Druck: $\geq 20 \text{ cm}$
<b>Level 3</b>	Wasserwiderstand: Durchlässigkeit bei Aufprall AATCC 42  Wasserwiderstand: Hydrostatischer Druck AATCC 127	AATCC 42 misst den Widerstand des Materials auf Wasserdurchlässigkeit unter konstantem und steigendem hydrostatischen Druck  AATCC 127 misst, ab welchem Druck das Material aufprallende Flüssigkeiten durchlässt	Aufprall von Spray $\leq 1,0 \text{ g}$  hydrostatischer Druck: $\geq 50 \text{ cm}$
<b>Level 4</b>	Viren-Durchlässigkeit ASTM FI 671	ASTM F1671 misst den Widerstand des Materials gegen pathogene Keime bei 2 psi und normalem Luftdruck	absolut undurchlässig

Damit man das Schutzlevel der Untersuchungskittel leicht erkennen kann, haben wir die Halsabschlüsse mit der Farbkodierung versehen, die den AAMI-Leveln entspricht.

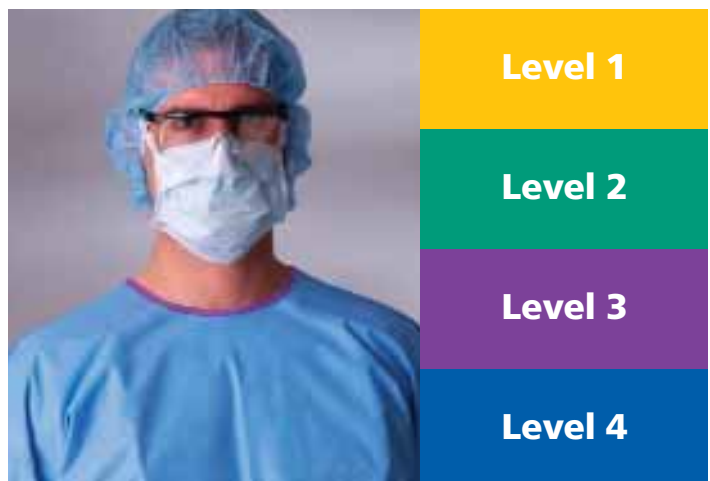



## Schutz-Level 1

### Klassischer Kittel aus atmungsaktivem Polypropylen für maximalen Komfort

- entspricht AAMI PB 70 Tests für Level 1
- hergestellt aus sehr atmungsaktivem, leichten, vierlagigen SMMS-Material
- verschweißte Nähte verhindern das Eindringen von Flüssigkeit und bieten 360° Rundum-Schutz
- der großzügige Schnitt ermöglicht bessere Abdeckung und größere Bewegungsfreiheit
- längere Taillenbänder und ein Klebeband als Halsverschluss sorgen für sicheren Sitz
- gelbe Farbkodierung am Hals

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONLV100	4-lagiges SMMS, gelb, reguläre Größe	50/Karton
NONLV100XL	4-lagiges SMMS, gelb, Größe XL	50/Karton



## Schutz-Level 2

### Die klassischen Kittel mittleren Gewichts von Medline sind atmungsaktiv, flexibel und stark genug für die härtesten Situationen

- entsprechen den AAMI PB 70 Tests für Schutz-Level 2
- aus vierlagigem SMMS-Material
- verschweißte Nähte, um mäßigen Mengen an Flüssigkeiten zu widerstehen und für 360° Rundum-Schutz zu sorgen
- der großzügige Schnitt ermöglicht bessere Abdeckung und größere Bewegungsfreiheit
- längere Taillenbänder und ein Klebeband als Halsverschluss sorgen für sicheren Sitz
- grüne Farbkodierung am Hals
- lieferbar in gelb

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONLV200	4-lagiges SMMS, gelb, reguläre Größe	100/Karton
NONLV200XL	4-lagiges SMMS, gelb, Größe XL	100/Karton



NONLV325

## Schutz-Level 3

**Premium Suprel™ Untersuchungskittel sind atmungsaktiv und schützen gegen Flüssigkeiten**

- entsprechen den AAMI PB 70 Tests für Schutz-Level 3
- extra starke, verschweißte Nähte, um hohen Mengen an Flüssigkeiten zu widerstehen und für 360° Rundum-Schutz zu sorgen
- großzügiger Schnitt, Taillebänder, Strickbündchen und Klettverschlüsse am Hals gewährleisten sichere Passform
- violette Farbkodierung am Hals

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONLV325	DuPont™ Suprel™ IsolationWear™, blau, reguläre Größe	50/Karton
NONLV325XL	DuPont™ Suprel™ IsolationWear™, blau, Größe XL	50/Karton



NONLV455XL

## Schutz-Level 4

**Prevention™ Trauma Chemo Kittel bieten Schutz gegen alle Flüssigkeiten**

- entsprechen AAMI PB 70 Tests für Schutz-Level 4
- ideal für Notaufnahme, Zytostatikalarbeit, usw., wo Sie sehr starken Flüssigkeiten ausgesetzt sein können
- bieten vollständige Abdeckung sowie großzügig bemessene Taillebänder, Strickbündchen und einen praktischen, Klettverschluss am Hals
- blaue Farbkodierung am Hals

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONLV455	Prevention Material, atmungsaktiv, blau, reguläre Größe	30/Karton
NONLV455XL	Prevention Material, atmungsaktiv, blau, Größe XL	30/Karton
NONLV455XXL	Prevention Material, atmungsaktiv, blau, Größe XXL	30/Karton



## Steriler Untersuchungskittel aus innovativem und atmungsaktivem Material

- entsprechen den AAMI PB 70 Tests für Schutz-Level 2
- aus vierlagigem SMMS-Material
- verschweißte Nähte, um mäßigen Mengen an Flüssigkeiten zu widerstehen und für 360° Rundum-Schutz zu sorgen
- der großzügige Schnitt ermöglicht bessere Abdeckung und größere Bewegungsfreiheit
- längere Taillenbänder und ein Klebeband als Halsverschluss sorgen für sicheren Sitz
- lieferbar in gelb

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONLV280	4-lagiges SMMS, gelb, reguläre Größe, steril	100/Karton

### Bevorzugte Einsatzgebiete:

- Notaufnahme
- Brandverletztencentrum
- Endoskopie
- Anästhesie/ ITS



### Die folgenden Kittel werden empfohlen für:

- **Brandverletztencentrum**
- **Notaufnahme**
- **Labor**
- **Dekontaminierung**
- **Situationen, in denen viel Flüssigkeitskontakt zu erwarten ist**

## Die klassischen, mit Polyethylen beschichteten Polypropylen-Kittel von Medline bieten ausgezeichneten Schutz für unbeschwertes Arbeiten

- aus Polypropylen, das mit Polyethylen beschichtet wurde
- hoher Schutz vor Flüssigkeiten
- Taillen- und Hals-Bänder sorgen für sicheren Sitz
- erhältlich mit geschlossenen Rücken und Strickbündchen

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON27116	geschlossener Rücken, Strickbündchen, Größe L	50/Karton
NON27116XL	geschlossener Rücken, Strickbündchen, Größe L	50/Karton

NON27116



CRI5000

## Sparen Sie Zeit und verhindern Sie „Ärmelrutschen“ mit den „Thumbs Up®“ Deluxe Polyethylen-Kitteln von Medline

- hergestellt aus blauem Polyethylen
- hoher Schutz vor Flüssigkeiten
- schürzenähnlicher Halsausschnitt ermöglicht schnelles An- und Ausziehen
- der besondere Schnitt am Ärmel mit vorgefertigtem „Daumenausschnitt“ verhindert, dass die Ärmel hochrutschen, wenn Sie Handschuhe anziehen

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
CRI5000	Thumbs Up-Schnitt, reguläre Größe	15/Schachtel, 75/Karton
CRI5001	Thumbs Up-Schnitt, Größe XL	15/Schachtel, 75/Karton



NON27SMS3

### Die untenstehenden Kittel werden empfohlen als:

- **Basis-Schutzkleidung**
- **Standard Schwesternkittel**
- **Besucher-Kittel**

## Die klassischen flüssigkeitsabweisenden Untersuchungs-Besucherkittel von Medline sind atmungsaktiv und flexibel

- hergestellt aus vierlagigen SMMS-Material oder aus Polypropylen
- Die Nähte der Kittel sind extra stark zum Schutz vor Flüssigkeiten.
- Der großzügige Schnitt bietet Ihnen vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit.
- Taillen- und Halsverschluss-Bänder sorgen für sicheren Sitz.

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON27SMS3	SMMS, blau, Größe L	100/Karton
NON27SMS3XL	SMMS, blau, Größe XL	100/Karton
CRI4000	PP, gelb, Größe L	50/Karton
CRI4000L	PP, grün, Größe L	50/Karton
CRIE4001	PP, gelb, Größe XL	50/Karton
CRIE4001CF	PP, gelb, Baumwollbünchen, Größe XL	50/Karton

**Bester Schutz**



NON28958

## Rutschfester Fußschutz mit flüssigkeits- und durchlässiger Beschichtung aus Polyethylen

- für maximalen Schutz vor Blut und Flüssigkeiten
- rutschhemmende Lauffläche

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON28958	reguläre Größe (bis Herrengröße 12)	100/Schachtel, 300/Karton
NON28959	Größe XL (bis Herrengröße 15)	100/Schachtel, 200/Karton



CRI2002

## Rutschfester Vlies-Fußschutz, ideal für längeres Tragen bei geringem bis mäßigem Flüssigkeitskontakt

- sehr atmungsaktives, flüssigkeitsabweisendes Material
- rutschhemmende Lauffläche

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
CRI2002	reguläre Größe (bis Herrengröße 12)	100/Schachtel, 300/Karton
CRI2003	Größe XL (bis Herrengröße 15)	100/Schachtel, 200/Karton



NON24556

## Das klassische, kostengünstige Polyethylen-Modell, das Schuhe und Füße vor Flüssigkeiten schützt

- aus CPE-Material
- flüssigkeitsundurchlässig

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON24556	Einheitsgröße, Großpackung	1000/Karton



NON27348

## Atmungsaktive, undurchlässige Stiefel Prevention™

- unsere Nummer 1, was Atmungsaktivität und Rundumschutz betrifft
- aus Prevention-Material, das absolut undurchlässig und dennoch atmungsaktiv ist
- mit Klettverschluss für guten Sitz
- rutschfeste Lauffläche durch Beschichtungs-Streifen
- reguläre Größe passt bis Herrengröße 12, XL bis Herrengröße 15

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON27348	kniehoch, reg. Größe	50/Schachtel, 150/Karton
NON27348XL	kniehoch, Größe XL	50/Schachtel, 150/Karton




## Die Hauben der Pro-Reihe bieten stundenlang Schutz und Tragekomfort

- flusenfreie, latexfreie Hauben aus SMMS,
- ein angenähtes Band hält die Haube flach und angenehm auf der Stirn.
- lieferbar in uni blau und verschiedenen Mustern
- erhältlich in 53 cm, 61 cm
- alle Hauben entsprechen den EU-Richtlinien

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
CRI1000	53 cm, grün	100/Schachtel, 500/Karton
CRI1001	53 cm, blau	100/Schachtel, 500/Karton
CRI1002	53 cm, weiss	100/Schachtel, 500/Karton
CRI1003	61 cm, weiss	100/Schachtel, 500/Karton
CRI1004	61 cm, blau	100/Schachtel, 500/Karton
CRI1005	61 cm, grün	100/Schachtel, 500/Karton

### FARBAUSWAHL

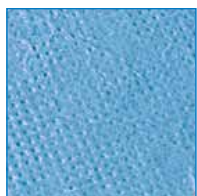

Blau



Weiss



Grün



Bunt

Bringen Sie Farbe und Stil in Ihre Abteilung!



Unser beliebtestes Modell

CRI1007

## Sheer-Guard OP-Hauben

**SRM** - mit Baumwollstoff verstärktes, Papier-ähnliches Material

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
CRI1007	OP-Haube	100/Schachtel, 500/Karton

Alle Hauben werden am Hinterkopf gebunden.



NONSH400

## Bartschutz von Medline

- Der Bartschutz besteht aus Polypropylen-Vlies und hat elastische Ohrschlaufen


Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONSH400	Bartschutz	100/Schachtel, 1000/Karton



NON27605



NON27610

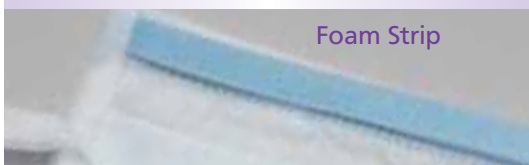

Foam Strip



## Erstmalig in der Branche!

Neu! **Pfefferminzduft-Masken** schützen vor unangenehmen Gerüchen im OP.

- der einzigartige Duft von Pfefferminze gibt Ihnen das Gefühl, ständig frische Luft zu atmen
- die flüssigkeitsabweisende Außenseite bietet Ihnen Schutz
- die Innenseite aus Zellulose erhöht den Tragekomfort
- praktische Ohrschlaufen sind durch Ultraschall mit der Außenseite der Maske verschweißt und verhindern so jegliche Irritation des Gesichts und bieten einen sicheren Abschluss

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON27605	Duft-OP-Maske mit Ohrschlaufen	50/Schachtel, 300/Karton
NON27610	Duft-OP-Maske mit Bändern	50/Schachtel, 300/Karton

## Anti-Fog-Masken

Unsere Anti-Fog-Maske hat eine Zellulose-Innenseite für mehr Komfort und ein breites Nasenstück, das den sicheren Sitz garantiert. Zusätzliche Eigenschaften:

### Schaum-Streifen

Ein dicker, weicher Streifen aus Schaum-Material verhindert Kondensbildung am oberen Rand der Maske und somit das Beschlagen von Brillengläsern und verhilft so zu optimaler Sicht.

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONE27403	0,6 cm Schaum-Streifen, Anti-Fog-Maske	50/Schachtel, 300/Karton

## Schutz vor Flüssigkeiten / OP-Masken / Filter-Masken



NON27710



NON27374

## Max X – Flüssigkeits-Schutzmaske: unser Produkt mit dem höchsten Schutz-Level

- das blendfreie, biegbare Visier mit Anti-Fog-Beschichtung garantiert optimalen Schutz für Augen und Gesicht.
- der einzigartige Drilex-Filter ist eine absolute Flüssigkeits-Barriere.
- ein bequemer Anti-Fog-Streifen aus weichem Schaum-Material verhindert, dass Brillen beschlagen

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON27710	Max X mit Visier und Bändern	25/Schachtel, 100/Karton
NON27712	Max X mit Bändern	50/Schachtel, 300/Karton

## Laser-Maske zum Schutz gegen Laser-Partikel

- ein spezieller Filter blockiert Laser-Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Micron
- die flüssigkeitsabweisende Außenseite ist verbunden mit einer angenehmen, weichen Innenseite aus Zellulose

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON27374	Laser-Maske	50/Schachtel, 300/Karton



## Standard-Chirurgie-Maske für Ihren täglichen Bedarf

- Innen- und Außenfläche aus Zellulose sind angenehm und kühl für den Träger.
- das breite Nasenstück sorgt für gute Passform

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONE27401	Standard-OP-Maske mit Schlaufen	50/Schachtel, 300/Karton
NONE27378	Standard-OP-Masken mit Ohrbändern	50/Schachtel, 300/Karton



## OP-Maske für empfindliche Haut

- ohne Farben oder Farbstoffe, die empfindliche Haut irritieren könnten
- Innen- und Außenseite aus angenehmer Zellulose

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON27386	OP Maske für empfindliche Haut	50/Schachtel, 300/Karton



**N95**  
zugelassen

## Anpassbare und konische Atemschutz-Maske

- N95 zugelassen! Entspricht den Richtlinien für den Einsatz bei TB
- sicherer Facial Lock® und formbares Nasenstück bieten maßgeschneiderte Passform für jedes Gesicht, deshalb passt eine Größe allen (nur anpassbare)
- ein Mikrofilter schützt vor Partikeln in Mikron-Größe
- doppeltes Band gewährt sicheren Halt für optimalen Schutz
- alle Atemschutz-Masken müssen entsprechend der OSHA und anderen Bestimmungen ausgesucht, angepasst und aufbewahrt werden

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON24500	konische Atemschutz-Maske, Größe M	20/Schachtel, 120/Karton
NON24502	konische Atemschutz-Maske, Größe S	20/Schachtel, 120/Karton


## FFP2 Masken

- ohne Farben oder Farbstoffe, die empfindliche Haut irritieren könnten
- Innen- und Außenseite aus angenehmer Zellulose

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONE24508	FFP2 Maske, flache Ausführung	20/Schachtel, 240/Karton

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONE24509V	FFP2 Maske, konusform mit Filter	10/Schachtel, 120/Karton

**NEU!**

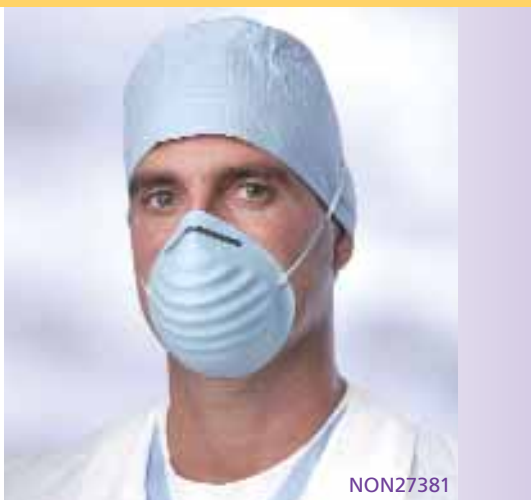

NON27381

## Konus-Maske – leicht aufzusetzen

- Ihre Form hält die Maske von Nase und Mund fern.
- Bietet somit mehr Schutz und Komfort.
- Erleichtert das Aufsetzen.
- Das formbare Nasenstück ermöglicht maßgeschneiderte Passform durch angenehm abgerundete Kanten.

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON27381	Konus-Maske	50/Schachtel, 300/Karton



NONFS300

## Einweg-Visier

- bietet dem Träger optimalen Schutz für Augen und Gesicht
- kann gemeinsam mit unserer Prohibit® Gesichts-Maske benutzt werden
- Das Visier besteht aus 6mm dickem Material, einem latexfreien Band mit weicher Schaum-Beschichtung sowie Anti-Fog-Behandlung für optimale Sicht

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONFS300	Einweg-Visier, voll	24/Schachtel, 96/Karton
NONFS400	Einweg-Visier, 3/4	24/Schachtel, 96/Karton



NON24776

NON24777A

NON24774

## Schutz-Brillen

- die Schutzbrillen mit weichen Vinyl-Gestellen passen leicht über Brillen.
- vier Belüftungs-Öffnungen schaffen zusätzlichen Komfort.
- lieferbar mit Anti-Fog-beschichteten Gläsern für klare Sicht

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON24775	Schutzbrille, Anti-Fog	36/Karton
NON24776	Schutzbrille, Standard	36/Karton

## Sicherheitsbrillen

- Sicherheitsbrillen bieten wirtschaftlichen und praktischen Schutz
- integrierter Augenbrauen- und Seitenschutz, weites Sichtfeld
- bequeme Passform
- große Schutzbrillen können über normalen Brillen getragen werden

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON24777A	Sicherheitsbrille, Besucher, durchsichtig, groß	20/Karton
NON24777S	Sicherheitsbrille, Besucher, durchsichtig, klein	20/Karton
NON24774	Sicherheitsbrille mit schwarzem Streifen	12/Karton

**Eine  
Medline-  
Innovation!**

**Das atmungsaktive Mikroporen-Laminat-Material von Medline**  
Unser einzigartig hergestelltes Material in der Lage, Hitze abzuleiten. Während Ihre Körpertemperatur sich erhöht, steigt das Hitze-Ableitungstempo, damit Sie sich wohl fühlen.



NONCV700L

## Der klassische, atmungsaktive Overall

- aus atmungsaktivem Mikroporen-Laminat-Material
- maximaler Schutz
- bequem auch bei längerem Tragen
- erhältlich in weiß

Beim Bestellen der Overalls geben Sie bitte die Größen von L bis XXL nach der Bestellnummer an.  
Beispiel: NONCV700L = Large

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONCV700L-XXXL	elastischer Arm- und Beinabschluss	25/Karton



NONCV600XL

## Der klassische SMS-Overall

- aus flüssigkeitsresistentem SMS-Material
- eine gute Kombination aus Komfort und Schutz
- erhältlich in weiß

Beim Bestellen der Overalls geben Sie bitte die Größen von L bis XL nach der Bestellnummer an.  
Beispiel: NONCV600L = Large

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONCV600L-XL	elastischer Armabschluss, gerader Beinabschluss	25/Karton



NONCV500L

## Der klassische Polypropylen-Vlies-Overall

- aus schwerem Polypropylen und Vliesstoff
- atmungsaktives, flüssigkeitsabweisendes Material
- erhältlich in weiß

Beim Bestellen der Overalls geben Sie bitte die Größen von L bis XXL nach der Bestellnummer an.  
Beispiel: NONCV500L = Large

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONCV500 L-XXL	Vlies, elastischer Armabschluss, gerader Beinabschluss	25/Karton
CRI3000	PP, elastischer Armabschluss, gerader Beinabschluss, Größe L	25/Karton
CRI3001	PP, elastischer Armabschluss, gerader Beinabschluss	25/Karton



NON27202XL  
NON27203XL



NON27212M  
NON27213M

## Klassische Bereichsbekleidung: vollständige Abdeckung durch blickdichtes Material

- aus atmungsaktivem, flüssigkeitsundurchlässigem SMS-Material
- anti-statisch vorbehandelt
- die großzügig geschnittenen Hemden haben eine Brusttasche und sind erhältlich mit Rundhals- oder V-Ausschnitt.
- die Hosen haben eine Gesäßtasche, der Schritt ist verstärkt.
- lieferbar in blau, mit Zugbändern oder Gummizug

Beim Bestellen dieser Modelle geben Sie bitte die Größen von S bis XXXL nach der Bestellnummer an. Beispiel: NON27212L = Large.

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON27212S-XXXL	Hemd, Rundhals	30/Karton
NON27202S-XXL	Hemd, V-Ausschnitt	36/Karton
NON27203S-XXL	Hose, Zugbänder	30/Karton
NON27213S-XXXL	Hose, Gummizug	36/Karton



NONSW100L

## Die Schutz-Kittel von Medline

Unsere anti-statischen Schutz-Kittel reichen bis knapp unterhalb des Knies. Sie werden vorne mit vier Druckknöpfen geschlossen, haben drei verstärkte Taschen und einen Belüftungsschlitz im Rücken für Komfort auch bei längerem Tragen. Sie haben eine praktische Schlaufe zum Aufhängen und sind erhältlich in weiß und blau.

## Klassischer Schutz-Kittel mit klassischem Kragen und Strickbündchen am Arm

- aus flüssigkeitsresistentem SMS-Material, um Verschmutzungen zu vermeiden
- erhältlich in weiß

Beim Bestellen der Schutz-Kittel geben Sie bitte die Größen von M bis XL nach der Bestellnummer an. Beispiel: NONSW100L = Large

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONSW100M-XL	weiß	30/Karton



NONSW500XL

## Klassischer Schutz-Kittel mit gestricktem Kragen und Strickbündchen am Arm

- aus flüssigkeitsresistentem SMS-Material, um Flecken zu vermeiden
- erhältlich in weiß

Beim Bestellen der Schutz-Kittel geben Sie bitte die Größen von M bis XL nach der Bestellnummer an. Beispiel: NONSW500L = Large

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONSW500M-XL	weiß	30/Karton

# Schutz-Jacken / Schürzen / Dusch-Hauben



## Klassische Schutz-Jacke mit gestricktem Kragen und Strickbündchen am Arm

- aus flüssigkeitsresistentem SMS-Material
- Die anti-statischen Schutz-Jacken reichen bis unterhalb der Taille
- Sie werden mit 5 Druckknöpfen vorne geschlossen, haben 3 verstärkte Taschen sowie einen Belüftungsschlitz im Rücken für Komfort auch bei längerem Tragen
- mit praktischer Schlaufe zum Aufhängen
- erhältlich in blau

Beim Bestellen der Schutz-Jacken geben Sie bitte die Größen von M bis XL nach der Bestellnummer an.

Beispiel: NONRP600L = Large

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NONRP600M-XL	blau	30/Karton



## Einweg-Poly-Schürzen, die effektiv vor Flüssigkeiten und Schmutz schützen.

Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON24280	104cm x 157cm, blau 4mm extra starker Kunststoff	10/Beutel, 100/Karton

- aus Polyethylen
- erhältlich in zwei Längen, um den Oberkörper zu schützen
- der praktische Schnitt ermöglicht schnelles An- und Ausziehen


Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON24272	leicht, 61 cm x 106 cm, weiß	100/Schachtel, 1000/Karton
NON24274	mittelschwer, 71 cm x 116 cm, weiß	100/Schachtel, 500/Karton
NON24274W	mittelschwer, 71 cm x 116 cm, einzeln verpackt, Spenderbox, weiß	50/Schachtel, 250/Karton



## Kostengünstige Dusch-Hauben schützen das Haar der Patienten beim Duschen

- Einweg-Plastikhauben schützen das Haar vor Feuchtigkeit


Art.-Nr.	Beschreibung	Stk./VE
NON24373	blau	500/Karton



**UNDERSTANDING  
THE AAMI STANDARDS...  
INCORPORATING THE AAMI GUIDELINES  
FOR ISOLATION GOWNS IN YOUR FACILITY**

The new guidelines published by AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) center on the determination of an objective standard for barrier classification of surgical gowns and gloves and other protective apparel. The ultimate goal of the standard is to provide clinicians and caregivers the ability to make informed decisions on the protective barrier products they wear. The AAMI committee was composed of clinicians and industry experts, including representatives from Medline and DuPont Medical Fabrics.

AAMI PPS1, "Liquid Barrier Performance and Classification of Protective Apparel and Drapes Intended for use in Health Care Facilities," recently recognized by the FDA, specifies criteria for product functionality and labeling in relation to blood and other body fluids, along with spray impact and hydrostatic pressure. A health care professional uses the ability to choose a protective barrier product commensurate with a particular procedure or process. The classifications range from level 1 for the lowest barrier protection, although this level still provides some protection from a cover gown worn inside an impervious level 4 gown that provides both bloodborne pathogen and viral protection.

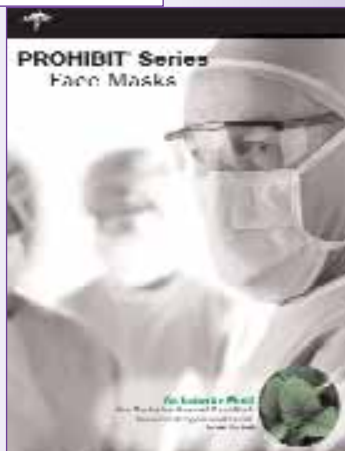

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

## Medline = Komplett-Schutz bei Schutz-Kleidung

### Breitgefächertes Sortiment

Medline bietet Ihnen viele Möglichkeiten, aus denen Sie die richtige Schutz-Kleidung für die Bedürfnisse Ihrer Einrichtung wählen können.

### Innovative Produkte

Medline entwickelt ständig Produkte, die Ihnen besseren Schutz und mehr Komfort bieten. Angefangen bei unserer Maske mit Duft (einer Branchen-Neuheit), bis hin zur Entwicklung von Isolations-Kleidung aus medizinischen Materialien von DuPont.

### Günstige Preise /Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Medline bietet die günstigsten Preise für die höchsten Levels an Sicherheit.

### Gute Qualität

Entwickelt und getestet unter den strengen amerikanischen Sicherheitsbestimmungen – auf Medline-Produkte können Sie vertrauen.

**Auf den Seiten 4 und 5  
finden Sie eine Übersicht,  
die Ihnen bei der Einhaltung  
der AAMI-Richtlinien hilft.**

### Ihre Kontaktdaten:

**Michael Koch Vertriebsleiter**

Mobil: +49 (0) 151-11574300

Mail: MKoch2@medline.com

**Robert Behrendt Vertriebsleiter**

Mobil: +49 (0) 171-1792824

Mail: RBehrendt@medline.com



**www.medline.com**

©2005 Medline Industries, Inc. One Medline Place, Mundelein, IL 60060

Prohibit and Thumbs Up are registered trademarks of Medline Industries, Inc.

Tyvek is a registered trademark of DuPont. DuPont and Suprel are trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company. Positive Facial Lock is a registered trademark of Alpha Pro Tech, Inc.

Velcro is a registered trademark of Velcro USA.

MKT205178/LIT171/20M